

TERVETULOA TESTAAKOTONA.FI -PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI!

Tämä näytteenottopaketti sisältää tarvittavat välineet laboratorionäytteen ottamiseen ja lähettämiseen. Lähettämäsi näyte analysoidaan sertifioitussa laboratoriossa asiantuntijoiden toimesta. Palvelun tarjoaa SYNLAB Suomi.



KLAMYDIA- JA TIPPURITESTI

HUOMIOITAVAA

- Tee testi, kun suojaamattomasta yhdynnästä on kulunut vähintään 5 vuorokautta.
- Ole vähintään 2 tuntia virtsaamatta ennen testin tekoa.
- **Älä tee alapesua ennen näytteenottoa.**




NÄYTTEENOTTO

1. Ota laatikossa oleva kertakäyttömuki ja purista sitä sivuista varovasti pohjan oikaisemiseksi. Virtsa kuppiin. Näytteeksi riittää alle puoli kupillista virtsaa.
2. Paketissa on kierrekorkillinen näyteputki. Varmista, että putkessa oleva säilöntäaine on putken pohjalla. Säilöntäainetta ei saa heittää pois.
3. Avaa korkki ja ota suojaussissa oleva pipetti esiin. Ota pipettiin virtsaa: purista leveää päätä ja vapauta puristus, kun pipetin kärki on virtsa-astiassa.
4. Siirrä virtsaa pipetillä näyteputkeen niin paljon, että neste pinta nousee putken mustien merkki viivojen väliin. Loput virtsasta voit kaataa vessanpönttöön ja heittää mukin roskeen.
5. Kierrä näyteputken korkki napakasti kiinni niin, ettei se vuoda. Kääntele putkea 3–4 kertaa ylösalaisin, jotta virtsa sekoittuu putkessa olevaan nestemäiseen säilytysaineeseen.
6. Laita näyteputki pakkauksesta löytyvään pieneen muovipussiin, jossa on imupaperin pala. Sulje pussi tiiviisti ja laita se pakkauslaatikkoon.
7. Sulje pakkauslaatikko huolellisesti kääntämällä pienet siivekkeet laatikon reunoissa oleviin koloihin. Postita pakkaus. Postimaksu on maksettu valmiiksi.

TULOKSEN VALMISTUTTUA

Tuloksen valmistuttua saat tekstiviestin tilausvaiheessa antamaasi puhelinnumeroon. Näet tuloksesi tunnistautumalla pankkitunnuksillasi [Katso tulos](#) -kohdasta.

Huomioithan, että jos tilasit testin kuntasi tai YTHS:n Testaakotona.fi -verkkosivuilta, on sinun kirjaututtava sisään kyseisen sivun [Katso tulos](#) -kohdasta.

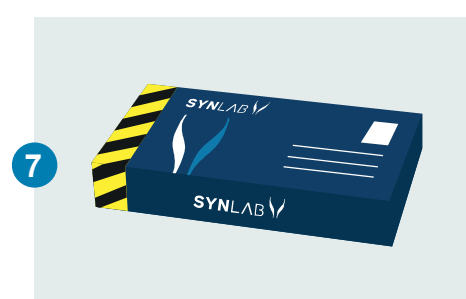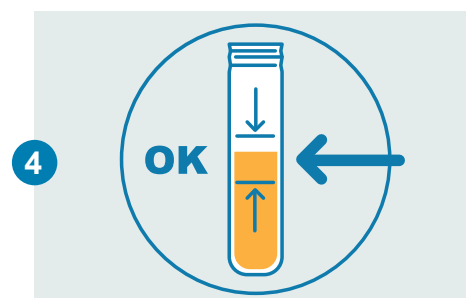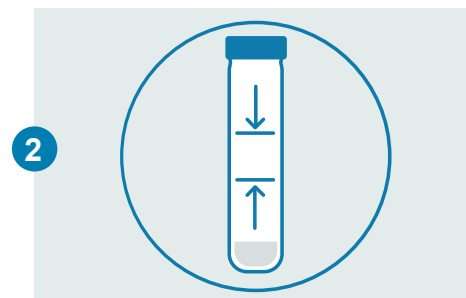

SE – Klamydia- och gonorrétest

- Utför testet när det gått minst 5 dygn efter oskyddat samlag.
 - Ta provet då det gått minst 2 timmar sedan du urinerade senast.
 - **Du bör inte tvätta underlivet före.**
1. Ta engångsmuggen från förpackningen och kläm den försiktigt från sidorna så att bottenpartiet blir rakt. Urinera muggen nästan halvfull med den urin som kommer först.
 2. I förpackningen finns ett provrör med skruvkork. Försäkra att förvaringsämnet, som finns provröret, ligger på provröret botten. Förvarningsämnet får inte kastas bort.
 3. Öppna provröret och ta fram pipetten som finns i en skyddspåse. Fyll pipetten med urin: kläm om den bredare delen och frigör greppet när pipettens spets är i urinkärl.
 4. Överför med hjälp av pipetten så mycket urin i provröret, att vätskeytan når mellan de svarta markeringslinjerna. Resten av urinen kan du tömma i toalettskålen och kasta bort muggen i avfallet.
 5. Skruva provrörets kork tätt fast så att det inte läcker. Vänd provröret upp och ned tre–fyra gånger, så att urinen blandas med förvaringslösningen som finns i provröret.
 6. Lägg provröret i plastpåsen som finns i förpackningen, med en bit absorberande papper. Tillslut påsen noggrant och lägg den i förpackningslådan.
 7. Tillslut lådan noggrant genom att vika de små flikarna in i hålen som finns i förpackningens sidor. Posta förpackningen. Postavgiften är färdigt betald.

ENG – Chlamydia and gonorrhoea test

- Perform the test at least 5 days after having unprotected sex.
 - Do not urinate for 2 hours before taking your urine sample.
 - **Do not wash your genitals before taking the sample.**
1. Take the disposable plastic cup found in the box and press in the sides to return it into its original shape. Catch into the cup the first urine that comes out when you start to urinate. Half a cup is more than enough.
 2. There is a screw-capped sample tube in the package. Make sure that tubes preservative solution lies on the bottom of the tube. Preservative solution shouldn't be discarded.
 3. Open the tube and take it disposable pipette out of its plastic packaging. Draw some urine into the pipette by pressing in its thick end and then releasing the pressure when the tip of the pipette is immersed in the urine in the cup.
 4. Use the pipette to transfer enough urine into the tube so that the surface rises to between the black bars. Pour the rest of the urine into the toilet.
 5. To prevent the urine from leaking out during transportation, screw in the cap of the sample tube firmly. Turn the tube up and down 3–4 times to mix the urine with the preservative.
 6. Put the tube into the resealable plastic bag. Do not remove the small piece of filter paper inside the bag. Seal the bag and put it into the box.
 7. Close the box carefully by inserting the wing-lets into the slots in the corners. Send the box in via regular mail. The postage is prepaid and no stamp is needed.



TITTA PÅ ANALYSRESULTATET

Så snart ditt prov har analyserats får du ett SMS. Du kan kolla upp dina resultat från webbplats när du är inloggat på sidan [Dina provresultat](#) med ditt bank-ID.

Observera att om du beställde testet från en webbplats för din kommun eller SHVS måste du logga in från den specifika sidan för att se dina provresultat.



CHECKING THE ANALYSIS RESULT

Once your sample has been analysed, you'll receive a text message. You can check your results by logging in to the page [See test results](#) with your bank ID.

Please note that if you ordered the test from a website for your municipality or FSHS, you will need to log in from that specific page to see your results.